

DERMAUX

DERMATOSCOPIO PROFX1

GUÍA DE USO



Las siguientes instrucciones de uso le permitirán familiarizarse usted mismo con el dispositivo. ¡Por favor revíselos cuidadosamente!




SANNA DERMA

Uso previsto

El dispositivo es un microscopio médico alimentado internamente para lesiones cutáneas. diagnóstico. Se puede utilizar tanto para el examen de la piel con contacto como sin contacto. con su particular sistema de iluminación. El adaptador de teléfono accesorio ayuda a conectar el dermatoscopio con el teléfono inteligente para capturar y mostrar imágenes. El dispositivo debe ser operado por un dermatólogo calificado o realizado en base a por recomendación de un médico profesional.

Descripción del producto

- ① Adjunto de imán
- ② Interruptores de encendido/apagado/- luz polarizada
- ③ Interruptor de luz no polarizado
- ④ Indicador de batería
- ⑤ Conector de carga
- ⑥ Anillo de enfoque

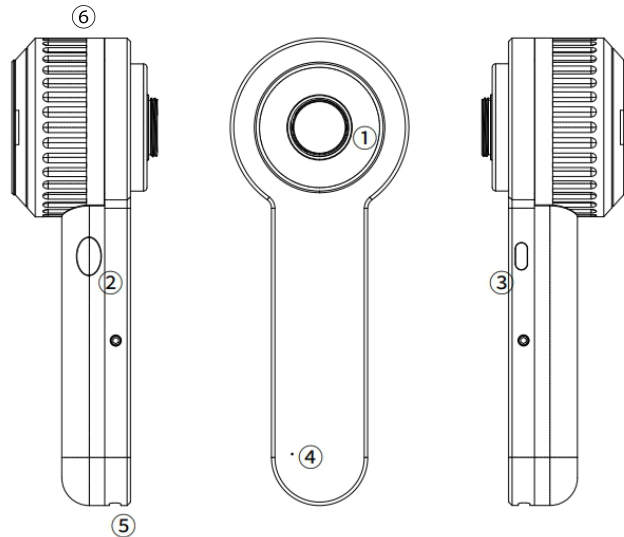

Alcance de la entrega

El conjunto se compone del dermatoscopio con accesorio magnético, teléfono adaptador, cable USB, maletín de transporte y manual de usuario.

Datos técnicos

Material	Aluminio y Vidrio
Diseña Óptico	Vidrio, 3 elementos 2 grupos, revestimiento antirreflectivo
Diámetro de lente	32mm
Magnificación	10x
Distorción	5%
Polarización	30 LED, 18 polarizados, 6 no polarizados, 6 polarizados ámbar
Resolución	300 LP/MM (Eje) 250 LP/MM (Bordes)
Tipo de led	SMD LED beads
Batería	1000mAh Lithium ion
Carga	USB-C
Duración	3 - 6 Horas

Cargue el instrumento por completo antes del primer uso.

• Operación

Para encender la iluminación, presione el botón (2, 3) en el instrumento. los dispositivo comienza con el modo polarizado blanco.

• Encendido apagado

Presione el botón de encendido/apagado (2) para encender el instrumento, mantenga presionado 3 segundos para encender fuera del instrumento. El instrumento se apagará automáticamente si no hay operación en 3 minutos.

• Modo polarizado

Presione el botón de encendido/apagado (2) en el instrumento para cambiar el modo polarizado. hay 3 Tipos de iluminación de luz en modo no polarizado. En este caso, el instrumento Comienza con 18 LEDs blancos en modo polarizado. Pulse un segundo de nuevo, se cambia al modo polarizado ámbar de 6 LED. Pulse un segundo de nuevo, se cambia a modo de 18 LEDs blancos polarizados + 6 LEDs ámbar polarizados.

• Modo no polarizado


Este modo se utiliza en el examen sin contacto. Retire la placa de contacto y sostenga el instrumento a unos 12 mm por encima de la piel a examinar. Prensa botón no polarizado (3) en el instrumento para cambiar al modo no polarizado. Hay 2 tipos de iluminación de luz en modo no polarizado, blanco y ámbar.

• Ajustar el enfoque

Gire el anillo de enfoque hasta que vea una marca de línea blanca.

Conector de teléfono inteligente

- (a) Coloque el tornillo del adaptador del teléfono en el centro de la cámara principal del teléfono inteligente
- (b) Acoplamiento de imán de tornillo en el adaptador de teléfono.
- (c) Vuelva a colocar el dermatoscopio accesorio de e imán juntos.

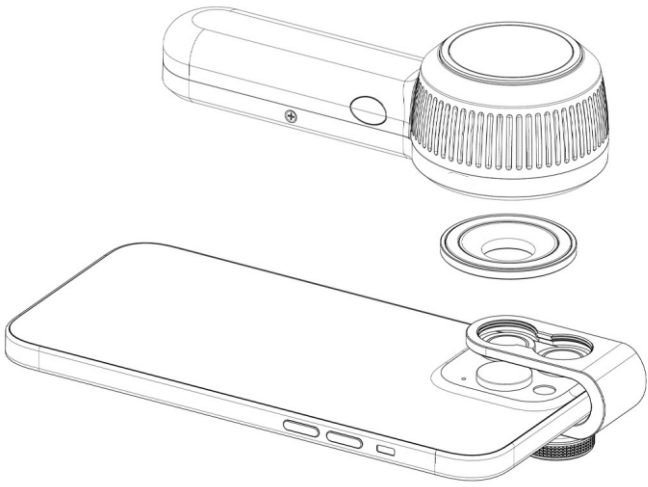

• Garantía

El dispositivo no requiere mantenimiento. El ciclo de vida esperado asciende con uso designado y la observación de la información de advertencia y seguridad, así como las instrucciones de mantenimiento hasta 5 años.

• Instrucciones de eliminación



El dispositivo no puede desecharse como basura doméstica. Desechar el dispositivo en una instalación de residuos que acepta productos y accesorios electrónicos/eléctricos.

• Información del fabricante

Si es necesario, póngase en contacto con el fabricante para obtener ayuda con respecto al uso o mantenimiento.



SANNA DERMA